

# Zirkonzahn®

*Human Zirconium Technology*



**100% ZIRCONIA PRETTAU - MADE BY CAD/CAM**

*“La zirconia necesita héroes” Enrico Steger*



*Zirkonzahn World Wide*



*Zirkonzahn Alemania*




*Zirkonzahn USA*



*Zirkonzahn México*

## *Prettau Zirconia*

Para demostrar la funcionalidad de este tipo de construcción, creamos cada mes algunos de estos trabajos junto al Dr. Thomas Suranyi y Lyondon F Cooper DDSPhD. Antes de empezar con la rehabilitación definitiva, fresamos el trabajo en resina. Ésta se quedará en la boca del paciente por un período de tiempo un poco más largo lo cual nos permitirá controlar el ajuste, la oclusión y la estética. Cuando el paciente está contento y todas las condiciones de higiene son propicias, de puede entonces iniciar a realizar el trabajo en zirconia Prettau a través de un escaneado doble. Las áreas vestibulares son ceramizadas y la encía construída en cerámica rosa. De esta manera el resultado de la rehabilitación es estético, estable y duradero.

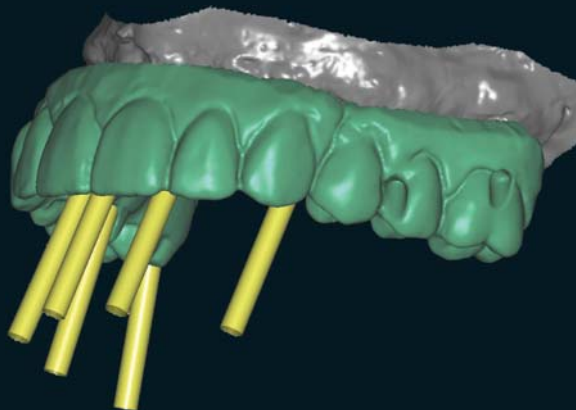

100% resina

## *El Prettau Bridge*

Dr. Thomas Suranyi y Lyndon F Cooper DDS PhD – University of North Carolina

Georg Walcher y Mauricio Cuéllar – Centro de Formación Zirkonzahn



## SISTEMA CAD/CAM 5-TEC (COMPLETO)

### Componentes del sistema:

- Sistema de fresado automático de 5 ejes simultáneos con dos piezas de mano y con medidor de herramientas (fresas)
- Escáner óptico S600, totalmente automático
- **Paquete de software básico compuesto por seis módulos:** software de archivo, software de escaneo, software de modelación, software de anidamiento, software CAM y software de fresado
- Computadora personal incluye pantalla de 16:10



*Derecho de instalación y envío reservados*

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona  
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



*Fresado con el sistema CAD/CAM 5-TEC*

