

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology




100% ZIRCONIA PRETTAU

Una prótesis inferior amovible con garantía de larga duración

La idea consiste en hacer una prótesis inferior amovible, sostenida por barras de conexión, con material de cerámica completa. Se utilizan barras de conexión de zirconia en cuyos extremos se fija una barra de anclaje para recibir una guía de resina. La fricción que provoca la aplicación de la guía de resina sujeta la prótesis en la barra de conexión. Además, estas barras son intercambiables. De ese modo, queda garantizada la durabilidad de la prótesis.


Las barras de conexión se fresan de una estructura de resina (Frame) totalmente anatómica para garantizar la colocación perfecta de cada barra de conexión en la restauración. Tanto la prótesis como las barras de conexión están realizadas íntegramente en zirconia. Únicamente la encía de color rosa se realiza con una carilla de cerámica. Lo que se obtiene es un puente Prettau, es decir, una prótesis inferior amovible y sostenida por barras de conexión.

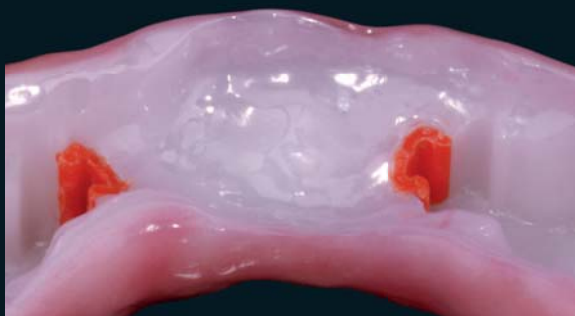

El Prettau Bridge

Georg Walcher, Zirkozahn Italia

Dr. Nico Bühler – Clínica de odontología reconstructiva de la Universidad de Basilea

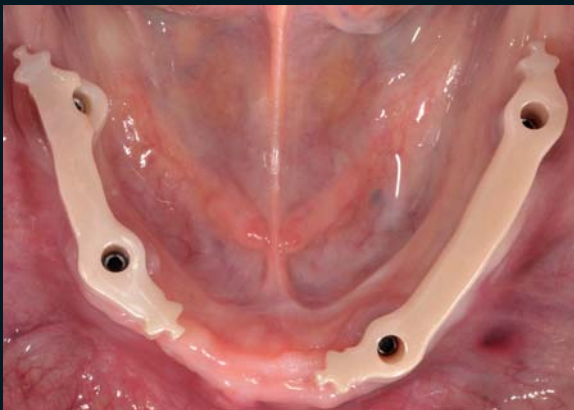

Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN World Wide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com*



Fresado con el sistema de fresado de Zirkonzahn



WEAA5609=