

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology




100 % ZIRCONE « PRETTAU »

Une prothèse complète amovible garantie à vie !

L'idée : réaliser une prothèse « tout céramique » amovible, ancrée sur deux barres en zircone fraisée. Ces deux barres comportent à chaque extrémité une partie mâle (attachement de type glissière) sur laquelle reposera la partie femelle en résine. La force de friction entre la partie mâle et la partie femelle de chaque attachement assurera la rétention de la prothèse. La partie femelle étant remplaçable, garantira une longue durée de vie à la prothèse.



Afin d'être positionnée correctement par rapport à la restauration, chaque barre est fraisée à partir d'une armature réalisée en résine Frame. Toute la restauration – barres comprises – est en zircone. Seules les parties gingivales sont revêtues de céramique cosmétique (rose). Au final vous avez donc un bridge amovible complet, ancré sur barres.

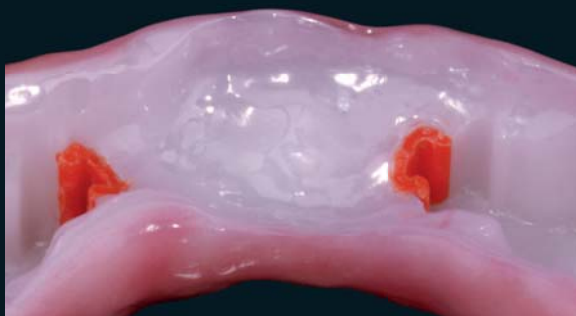

Bridge « Prettau »

Georg Walcher, Zirkonzahn Italie

Dr. Nico Bühler – Clinique de dentisterie restauratrice (Université de Bâle)

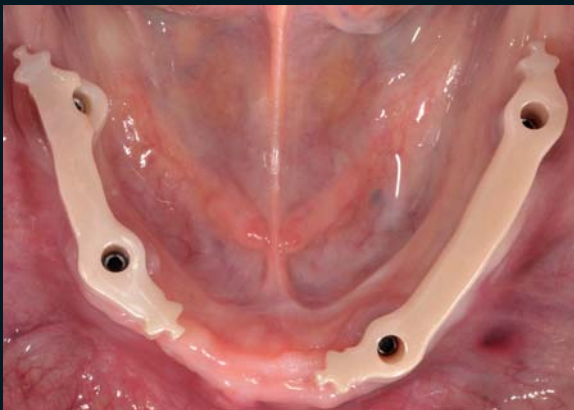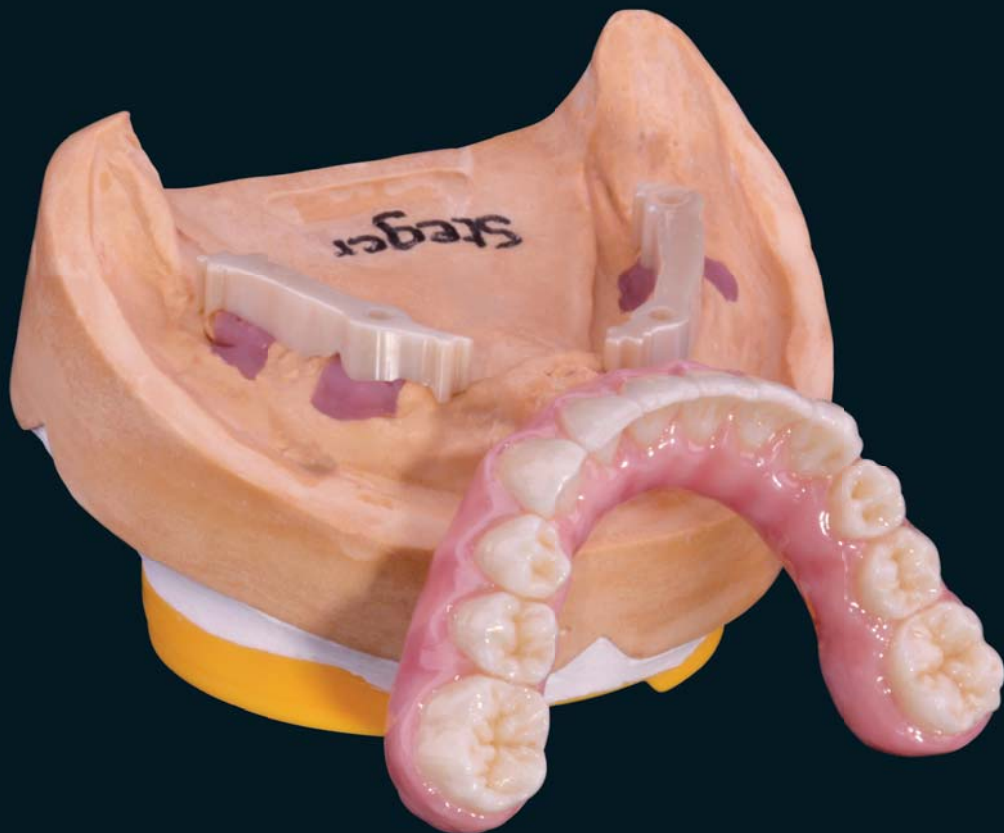

Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

ZIRCONLAB - Yves Probst - Tel +33 388 69 55 44 - zirconlab@wanadoo.fr - www.zirconlab.com



Fraisage réalisé avec le pantographe Zirkonzahn



WEAA5709=