

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



ALL ZIRCONIA



1. Realizzazione di una barra superiore e inferiore
2. Struttura di passivazione con tecnica galvanica




3. Arcate sup. e inf. modellate in resina
4. Fresatura di un blocco 16 presinterizzato di zirconia



5. Strutture in zirconia infiltrate in due colori
6. Applicare un sottile strato di ceramica gengivale e uno strato sottile di dentina sulle corone come cottura wash (poi procedere con la stratificazione tradizionale)



7. Struttura galvanizzata per la passivazione in situ
8. Controfresaggio pronto per l'incollaggio

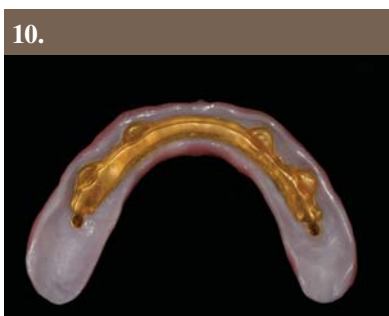

9. Incollaggio delle due parti tramite cemento anaerobico
10. Zirconio incollato con la barra in galvano

11.



12.



11. Il lavoro in zirconia inserito sulla barra è ben passivato

12. Vista del manufatto inserito

13.



14.



13. Lavoro inferiore finito

14. Lavoro superiore finito

15.



16.



15. Barra fissata tramite viti d'oro


16. Barra fissata tramite viti d'oro



Lavoro finito in bocca al paziente

Zilio Aldo, Venezia

Zirkonzahn®

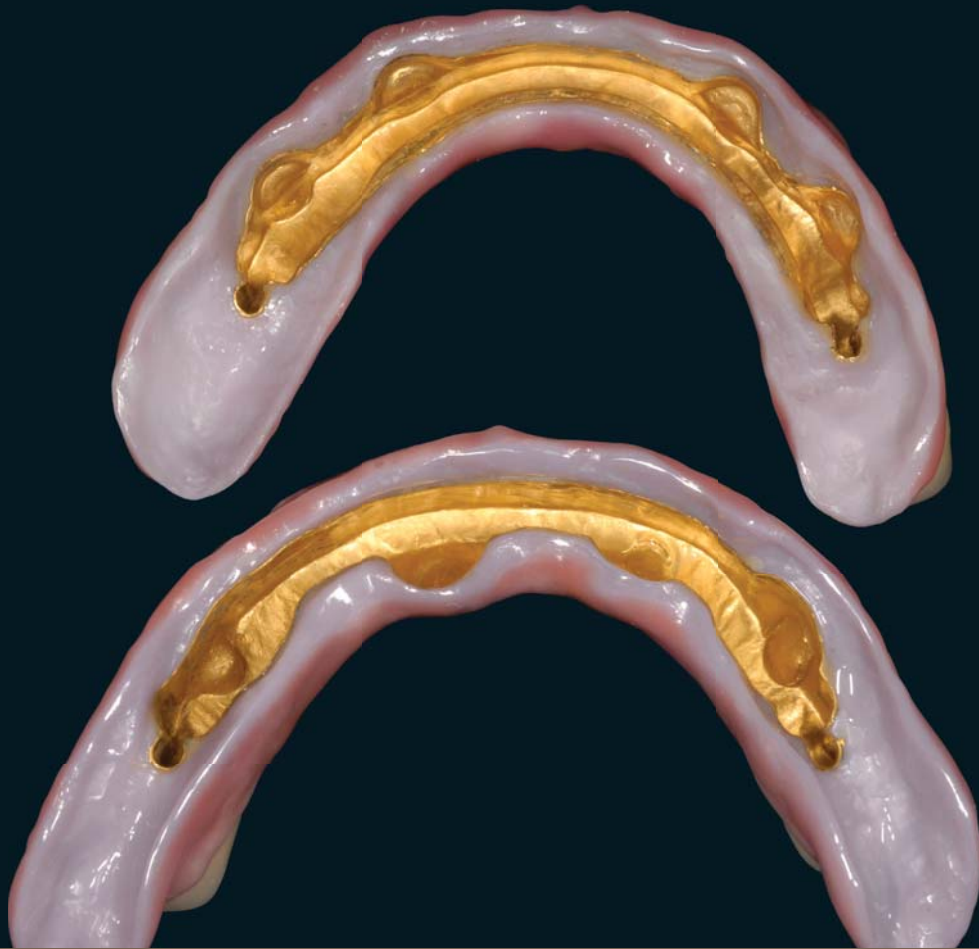

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



fresato con il sistema Zirkonzahn



WEAA5801=