

# Zirkonzahn®

I.P.

*Human Zirconium Technology*



**100% ZIRCONIA PRETTAU - MADE BY CAD/CAM**

*„Zirconia necessita eroi“ Enrico Steger*



*Zirkonzahn World Wide*



*Zirkonzahn Germania*




*Zirkonzahn USA*



*Zirkonzahn Messico*

## *Zirconia Prettau*

Per dimostrare la funzionalità di questo tipo di costruzione, realizziamo ogni mese alcuni lavori di questo tipo in collaborazione con il Dr. Thomas Suranyi e il Dr. Lyondon F Cooper DDS PhD. Prima di realizzare il restauro definitivo, fresiamo il lavoro in resina che rimarrà nella bocca del paziente per un periodo di tempo necessario per permettere di controllare il fit, l'occlusione e l'estetica. Quando il paziente è contento e tutte le condizioni d'igiene sono soddisfatte, si può cominciare a realizzare il lavoro definitivo in zirconia Prettau tramite la tecnica della doppia scansione. Le parti vestibolari vengono in seguito stratificate e la gengiva realizzata in ceramica rosa. In questo modo, il risultato è un restauro stabile e durevole.

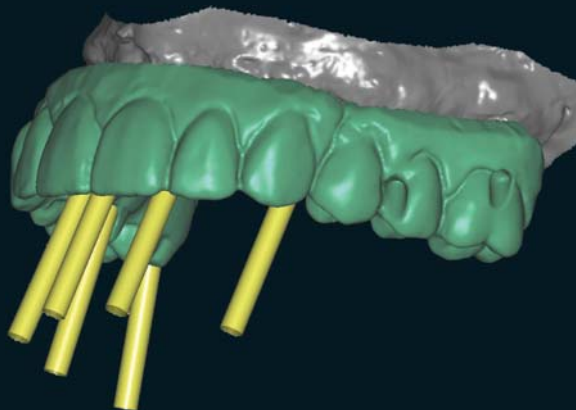

100% resina

## *Il Prettau Bridge*

Dr. Thomas Suranyi e Lyndon F Cooper DDS PhD – University of North Carolina  
Georg Walcher e Mauricio Cuéllar - Zirkonzahn Education Center



## SISTEMA COMPLETO CAD/CAM SYSTEM 5-TEC

### *Componenti del sistema:*

- *Fresatrice computerizzata con tecnologia di fresatura simultanea a 5 assi con due manipoli e set per la misurazione delle frese*
- *Scanner ottico S600, completamente automatico*
- **Pacchetto software composto da 6 moduli:**  
*software di scansione, software di modellazione, software di fresatura, software di archivio, software di nesting, software CAM*
- *Personal Computer completo di ampio schermo 16:10*



*Caratteristiche tecniche e tempi di consegna con riserva di modifi che senza preavviso*

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com*



*Fresato con il sistema CAD/CAM 5-TEC*

