

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology




100% CYRKONU PRETTAU

Ruchoma całkowita proteza żuchwy – dożywotnia gwarancja

Naszą ideą było stworzenie całkowicie ceramicznej ruchomej protezy w żuchwie. Poddaliśmy obróbce dwie kostki cyrkonu; obie zostały umieszczone w specjalnych uchwytach, po jednym z każdej strony. Dzięki umieszczeniu matryc teflonowych nad uchwytami osiągamy tarcie niezbędne do unieruchomienia protezy i nadania jej pozycji stabilnej. Gwarantujemy trwałość.


Kostki cyrkonu poddajemy obróbce poprzez redukcję pełnego zarysu anatomicznego ramy modelu, zapewniając jednocześnie optymalną pozycję materiału podczas odbudowy. Powstała proteza wykonana jest w 100% z cyrkonu. Jedyne różowa tkanka dziąseł jest licowana porcelaną. Efektem końcowym jest pełny ruchomy most z Zirkon Prettau.

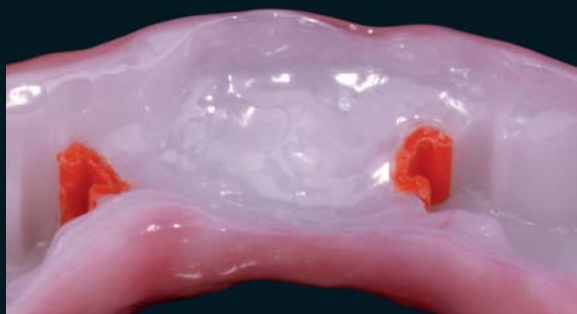


Most Prettau

Georg Walcher, Zirkonzahn Włochy

Dr. Nico Bühler – Klinika Stomatologii Rekonstrukcyjnej – Uniwersytet w Bazylei, Szwajcaria

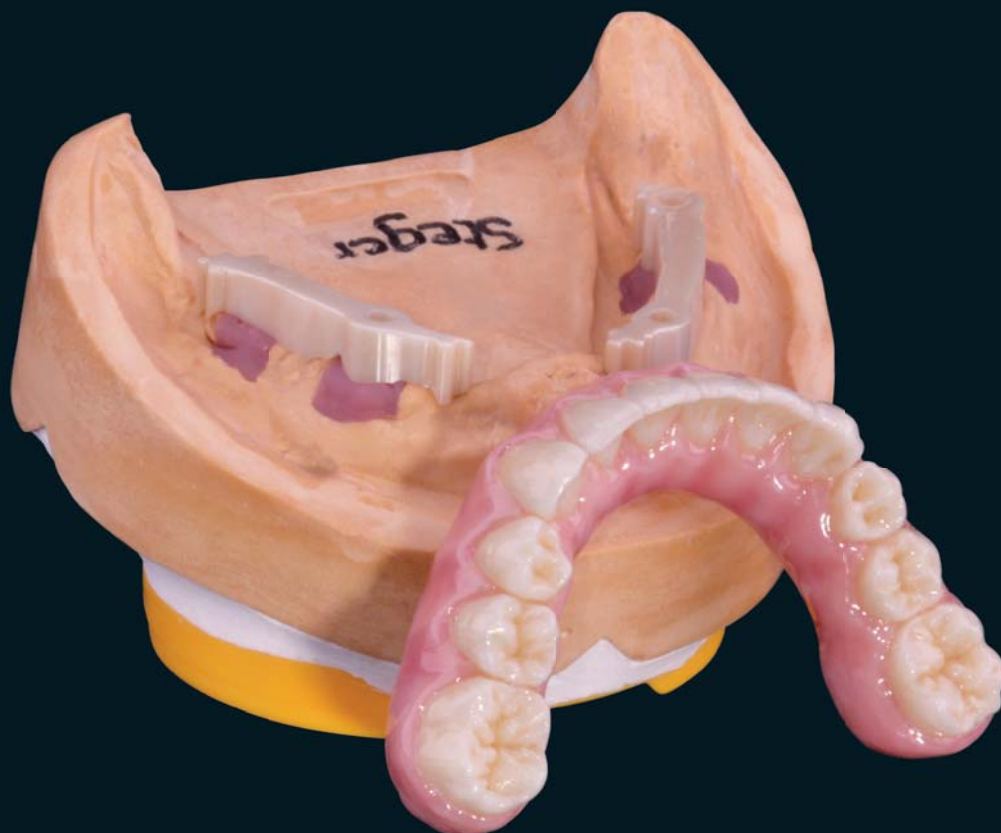


Zirkonzahn®

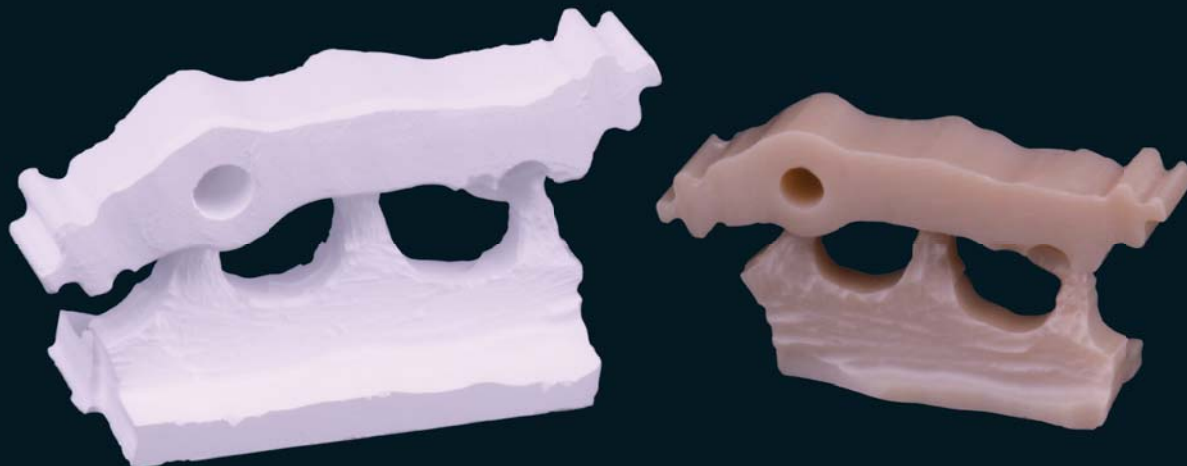

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN POLAND - ul. I Armii Wojska Polskiego 9 - 15-102 Białystok - zirkonzahn@o2.pl

T +48 501603603 (Edyta) - T +48 500123600 (Adam) - T +48 501602102 (Irek) - www.zirkonzahn.com

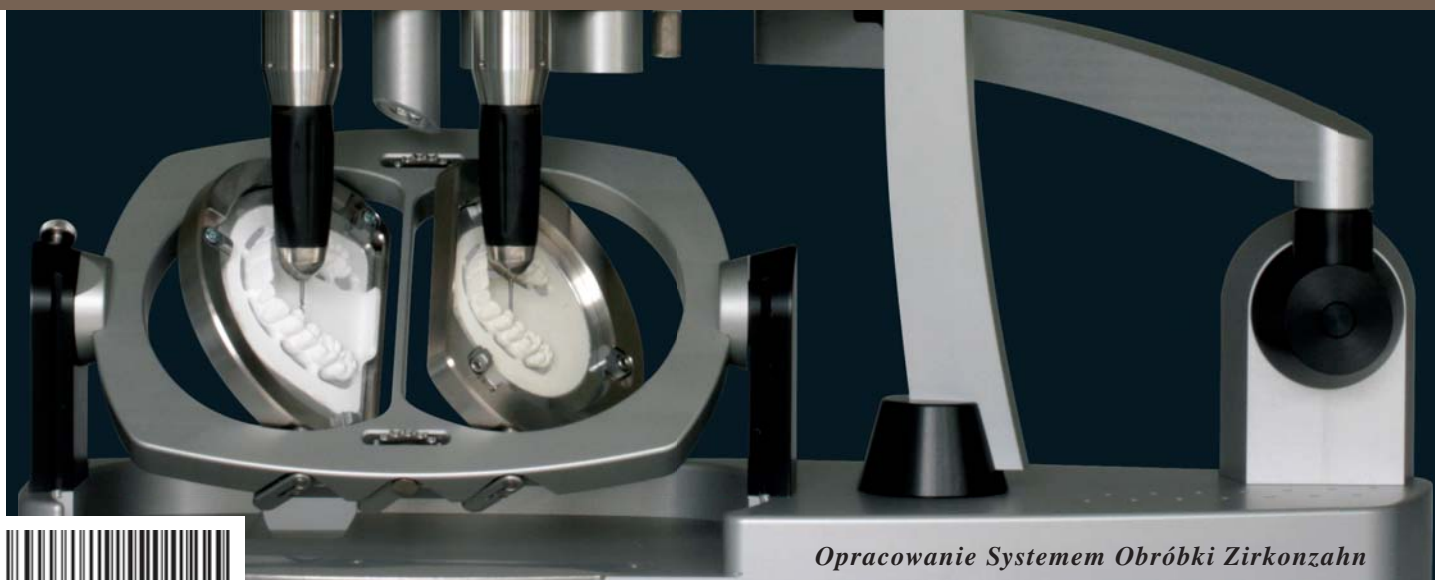

Opracowanie Systemem Obróbki Zirkonzahn



WEAA6409=