

# Zirkonzahn®

*Human Zirconium Technology*



**100% ZIRCONIA PRETTAU**

*„O Zircónio necessita de Heróis“ Enrico Steger*

## *Pontes Prettau aparafusadas sobre duas barras em zirconia*


A posição angulada dos implantes pode provocar a emergência dos parafusos por vestibular dos dentes. Para evitar esta situação, decidimos realizar duas barras primárias, sobre as quais será aparafusada secundariamente uma ponte Prettau. A ligação aparafusada é efectuada com recurso ao sistema Srew-Tec, ou seja, é realizada uma rosca na barra primária sobre a qual depois da sinterização cimentamos uma rosca fêmea metálica pré-formada sendo posteriormente usado um parafuso para unir a ponte á estrutura primária. Neste caso a secundária é fixa por quatro parafusos á barra primária. Deste modo podemos deslocar a ligação aparafusada para palatino e realizar de forma estética a área vestibular. Para garantir facilidade de higienização a área gengival é feita de forma convexa e o polimento é realizado com borrachas de polir zircónio.



## *Prettau Bridge*

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Espanha

Georg Walcher – centro de formação Zirkonzahn

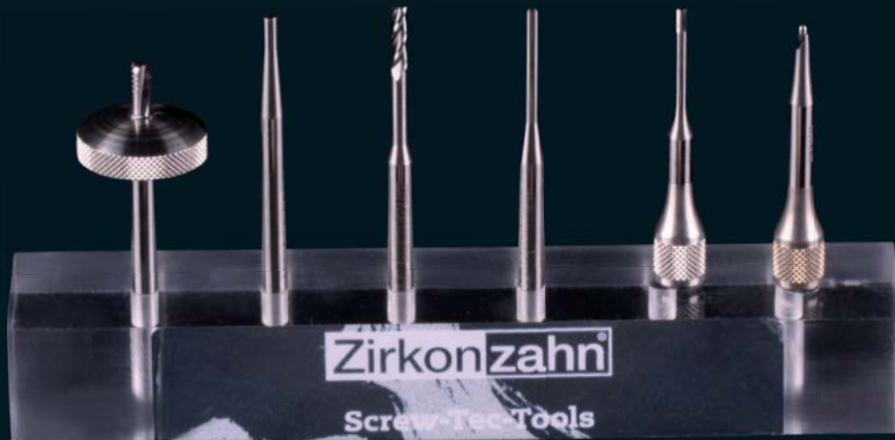

# Zirkonzahn®

## *Os polidores de Zirconia: Velocidade e Precisão não são conceitos contraditórios*

Os novos polidores de zirconia da Zirkonzahn permitem o polimento mecânico rápido e seguro do óxido de zircónio sem produzir calor e sem comprometer a precisão.

O polidor azul é ideal para o acabamento abrasivo das margens das estruturas ou áreas que devem ser ligeiramente polidas. Os polidores rosa são adequados ao polimento principal. O brilho final é conseguido do através do polidor de zirconia cinzento.



*Este novo produto caracteriza-se pela sua grande estabilidade e fiabilidade.*

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal - Luis Macieira - Tel +351 217 58 62 69 - [zirkonzahnportugal@clix.pt](mailto:zirkonzahnportugal@clix.pt)

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) - [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)



*Leve as suas esperanças  
e realize os seus sonhos*

Visite-nos: Stand N° 10

**IDS Colónia**  
**2011** 22.-26. Março

Pavilhão 4.2 / Passeio G



WEAA5926=