

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



ПРОЗРАЧНЫЙ ЦИРКОНИЙ PRETTAU – ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА CAD/CAM

Забудьте о сколах керамики

Andreas Steyer

Prettau Zirkon

Для обеспечения долговечного результата при изготовлении реставраций с опорой на имплантаты для верхней и нижней челюсти необходимо использовать материалы с высокой механической прочностью. Это связано с тем, что из-за отсутствия проприоцептивных рецепторов естественных зубов, пациенты прикладывают значительно более высокие усилия при смыкании челюстей. Новый модифицированный материал циркониевой группы Prettau Zirkon полностью удовлетворяет повышенным требованиям к механической прочности. Все функциональные области и области окклюзионного контакта на 100% изготавливаются из этого материала. Только вестибулярная поверхность передних зубов, за исключением кромки режущего края, облицовывается керамическими материалами. Высокая прочность материала Prettau Zirkon гарантирует стойкость к абразивному износу и предотвращает сколы кромок режущего края и бугорков. Для традиционных полностью облицованных цельнокерамических мостовидных протезов вероятность возникновения этого эффекта (Chippen) остается очень высокой.



Prettau Bridge

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Испания

Georg Walcher - Zirkonzahn Education Center




Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Тел +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

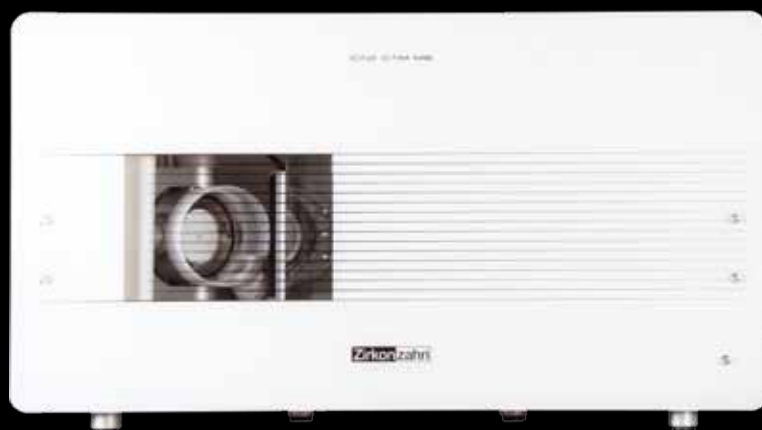

WEA465231

изготовлено системой CAD/CAM 5-TEC